

AVANOS

Mondzorg

Mondzorgkits & losse componenten

MEER KEUZE. MEER COMPLIANCE. EENVOUDIGER IN GEBRUIK.

Een compleet assortiment oplossingen voor mondzorg, ontworpen door verpleegkundigen, voor verpleegkundigen

mini



MONDZORG IS ONMISBARE ZORG VOOR BEADEMDE PATIËNTEN.



HET BELANG VAN MONDZORG OP DE INTENSIVE CARE IS GOED GEDOCUMENTEERD.⁵

- 63% van de patiënten op de intensive care vertoont kolonisatie in de mond van pathogenen in samenhang met VAP.⁶
- De afwezigheid van voldoende speeksel bij geïntubeerde patiënten veroorzaakt ernstige xerostomie (droge mond), wat kan bijdragen tot het optreden van mucositis (ontsteking van het mondweefsel) en orofaryngeale kolonisatie met gramnegatieve bacteriën.⁷
- Als bij een geïntubeerde patiënt geen effectieve en complete mondhygiëne wordt toegepast, ontstaat er binnen 48 uur bacteriële plaque op het gebit.⁸
- Naarmate de tandplaque toeneemt, neemt ook de kans op pneumonie toe.¹⁰



Zonder intensieve mondzorg ontstaat er tandplaque, waardoor het risico op VAP toeneemt.⁹

- Uitgebreide mondhygiëne wordt o.a. door de volgende toonaangevende organisaties erkend als essentieel bij het voorkomen van HAP en VAP:
 - NHS: National Health Service - VK¹⁵
 - Centers for Disease Control and Prevention (CDC)¹⁷
 - Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC)¹¹
 - American Association of Critical Care Nurses (AACN)¹²
 - Institute for Healthcare Improvement (IHI)¹³
 - Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO); Robert Koch-Institut¹⁶

VAP IS EEN BELANGRIJK KLINISCH PROBLEEM... DAT HOGE INCIDENTIECIJFERS, STERFTECIJFERS EN KOSTEN MET ZICH MEEBRENGT¹

PREVENTIEMAATREGELEN ZIJN ALTIJD DE MOEITE WAARD ZELFS ALS HIERMEE MAAR ÉÉN GEVAL VAN VAP WORDT VOORKOMEN

- Ongeveer **60%** van alle sterfgevallen onder patiënten met zorginfecties wordt in verband gebracht met ziekenhuisgerelateerde pneumonie en dit sterftecijfer is hoger bij patiënten die VAP ontwikkelen.¹
- Zo'n **8% to 28%** van de patiënten op de intensive care ontwikkelt VAP.²
- Het sterftecijfer onder patiënten die ziekenhuisgerelateerde pneumonie oplopen is **20% tot 41%**.³
- VAP verlengt de verblijfsduur van patiënten op de intensive care met **4 tot 6 dagen**.⁴
- Naar schatting brengt elk geval van VAP een kostenverhoging van **€ 33.000** met zich mee.³

Avanos hecht belang aan het bieden van een reeks innovatieve, effectieve klinische oplossingen waarmee artsen het risico van VAP kunnen beperken. Hiertoe behoren:

MICROCUFF⁺ endotracheale tubes

AVANOS⁺ Mini-BAL bemonsteringskatheter

AVANOS⁺ gesloten uitzuigsystemen met turboreiniging

AVANOS⁺ mondzorgkits (kits, componenten/pakketten & complianceprogramma)

NU VERKRIJGBAAR:

AVANOS⁺ Oral Care Kit (q4), mini-kit en losse componenten

AVANOS⁺
Oral Care Kit - q4



AVANOS⁺
Oral Care
Advanced Kit



AVANOS⁺
Oral Care
Moderate Kit



AVANOS⁺
Oral Care
Kit - Mini



MET DE PRODUCTEN UIT ONS PORTFOLIO KAN AAN ELK PROTOCOL WORDEN VOLDAAN

COMPONENTEN/PAKKETTEN	KENMERKEN	VOORDELEN
<p>AVANOS* PREP-PAKKET met zelfreinigende Yankauer met hoes, suctiehandvat, Y-connector</p> 	<p>Zelfreinigende Yankauer met hoes en PEEP-afsluiting</p>  <p>Atraumatische tip met hoge stroomsnelheid en meerdere openingen</p> <p>Ergonomisch vormgegeven suctiehandvat, past op alle suctiehelpmiddelen</p> <p>Zachte aan-uitschakelaar op het suctiehandvat</p> <p>Klemoptie op het suctiehandvat</p> <p>Y-connector</p>	<p>Reinigt aanslag en secreties uit de schacht na uitzuiging</p>  <p>AVANOS* Yankauer met zelfreinigende hoes na gebruik... zonder afspoelen.</p>  <p>Standaard Yankauer zonder afspoelen na gebruik... met afspoelen.</p> <p>Biedt snelle en effectieve verwijdering van secreties.</p> <p>Biedt de zorgverlener een gebruiksvriendelijke reinigingsprocedure</p> <p>Biedt eenvoudige uitzuigregeling. Zachte gebruiksvriendelijke knop.</p> <p>Biedt handige en schonere opslag na elk gebruik</p> <p>Biedt meerdere functies in één houder</p>
<p>AVANOS* TANDENBORSTELPAKKET met suctietandenborstel en applicatorswab</p> 	<p>Soepele tandenborstel uit één stuk met zachte en flexibele haren</p> 	<p>Voorkomt het uitvallen van borstelharen. Reinigt aanslag en secreties. Tandens poetsen helpt bij het verminderen van tandplaque.¹³</p>
<p>AVANOS* SUCTIESWABPAKKET met suctieswab en applicatorswab</p> 	<p>Lange gehoekte suctieswab met zachte sponstip</p> <p>Grote uitzuigopening in de swab</p>	<p>Bevordert de toegang tot de mond van de patiënt vanaf de zijkant van het bed. Stimuleert, reinigt en verfrist het mondslijmvlies.</p> <p>Vermindert het risico op verstopping.</p>
<p>AVANOS* SUCTIEKATHETERS</p> 	<p>Flexibele slang</p>	<p>Zorgt voor flexibel manoeuvreren bij het uitzuigen van het orofaryngeale gebied.</p>

AVANOS PAKT DE BEKENDE RISICOFACTOREN VOOR VAP AAN MET FLEXIBELE, GEBRUIKSVRIENDELIJKE MONDZOR GKITS

AVANOS* MONDZOR GKITS VOOR VOLWASSENEN HEBBEN DE VOLGENDE KENMERKEN:

- Dankzij de kleurcodeerde verpakking kunnen zorgverleners specifieke componenten eenvoudig herkennen en de compliance op het gebied van mondzorg eenvoudig navolgen.
- De rechthoekige kits zijn voorzien van een wandhaak, zodat deze eenvoudig binnen handbereik zijn in de kamer van de patiënt en de compliance wordt bevorderd.
- Afzonderlijke pakketten bieden zorgverleners de mogelijkheid per keer het juiste hulpmiddel te kiezen op basis van de behoeften van de patiënt en het betreffende ziekenhuisprotocol.

9 op de 10 artsen zijn het ermee eens dat de AVANOS* q4-mondzorgkit de frequentie van mondzorg verbetert†

AVANOS* ORAL CARE KIT - q4 | ART. 99946

Voor gebruik met een mondzorgprotocol van 4 uur

- 1 - **Prep-pakket** (met 1 Yankauer met hoes, 1 Y-connector en 1 suctiehandvat)
- 2 - **Tandenborstelpakketten** (met 1 suctietandenborstel, 1 mondswab en 1 lege beker voor oplossing)
- 4 - **Suctieswabpakketten** (met 1 suctieswab, 1 applicatorswab en 1 lege beker voor oplossing)

2 - Suctiekatheters

Verpakking: 16/doos



AVANOS* ORAL CARE ADVANCED KIT | ART. 25928

Voor gebruik met een mondzorgprotocol van 4 uur

- 1 - **Prep-pakket** (met 1 Yankauer met hoes, 1 Y-connector en 1 suctiehandvat)
- 2 - **Tandenborstelpakketten** (met 1 suctietandenborstel, 1 mondswab en 1 lege beker voor oplossing)
- 4 - **Suctieswabpakketten** (met 1 suctieswab, 1 applicatorswab en 1 lege beker voor oplossing)

Verpakking: 24/doos



AVANOS* ORAL CARE MODERATE KIT | ART. 25930

Voor standaard mondzorgprotocollen

- 1 - **Prep-pakket** (met 1 Yankauer met hoes, 1 Y-connector en 1 suctiehandvat)
- 1 - **Tandenborstelpakket** (met 1 suctietandenborstel, 1 mondswab en 1 lege beker voor oplossing)
- 2 - **Suctieswabpakketten** (met 1 suctieswab, 1 applicatorswab en 1 lege beker voor oplossing)

Verpakking: 32/doos



AL HET GEBRUIKSGEMAK VAN MONDZOR GKITS IN COMBINATIE MET COMPONENTEN DIE ZIJN ONTWORPEN VOOR GEBRUIK BIJ JONGE PATIËNTEN.

NIEUW AVANOS* MINI-MONDZOR GKITS HEBBEN DE VOLGENDE KENMERKEN:

- Een handig afscheursysteem met kleurgecodeerde pakketten die zorgverleners de mogelijkheid bieden per keer het juiste hulpmiddel te kiezen op basis van de behoeften van de patiënt en het betreffende ziekenhuisprotocol.
- Dankzij de stapsgewijze instructie met kleurcodering is het eenvoudiger om specifieke pakketten te identificeren en de mondzorgcompliance na te gaan.
- Yankauer met atraumatische tip met hoge stroomsnelheid maakt snelle, effectieve verwijdering van orale secreties mogelijk. En de zelfreinigende schacht met hoes en PEEP-afsluiting houdt deze droger en schoner na elk gebruik.

AVANOS* MINI ORAL CARE ADVANCED KIT | ART. 970008-5


Voor gebruik met een mondzorgprotocol van 4 uur

1 - Prep-pakket (herbruikbaar - met zelfreinigende Yankauer met hoes)

2 -Tandenborstelpakket (met suctietandenborstel, mini-applicatorswab, lege beker voor oplossing en mini-uitzuigkatheter van 8 Fr)

3 - Mini-suctieswabpakket (met mini-suctieswab, mini-applicatorswab en lege beker voor oplossing)

Verpakking: 24/doos

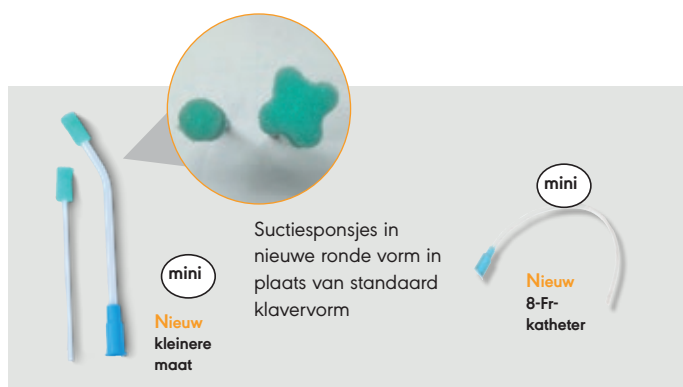

1 Kollef MH. What is ventilator-associated pneumonia and why is it important? *Respiratory Care* 2005 June; 50(6): 714-724
2 Chastre J, Fagon J. Ventilator-Associated Pneumonia. *Crit Care Med* 2002; 165: 867-903
3 Ventilator-Associated Pneumonia. *Crit. Care Nurse*. June 2008; 28:83-85.
4 Rello J, Ollendorf D, Oster G, Vera-Llonch M, Bellm L, et al. Epidemiology and Outcomes of Ventilator-Associated Pneumonia in a Large US Database. *Chest*. 2002; 122:2115-2121.
5 Fitch J. Oral Care in the ICU. *American Journal of Critical Care* 1999 Sept; Vol. 8 No. 5; 324-318.
6 Cason CL et al: Nurses' implementation of guidelines for VAP from CDC, *AM J Crit Care*. 2007 Jan; 16(1).
7 Dennesen, P, et. al. Inadequate salivary flow and poor oral mucosal status in intubated intensive care unit patients, *Crit Care Med* 2003 Vol. 31, No. 3
8 Bagg, J. et al, *Essentials for Microbiology*, Chapter 21, Oxford University Press, 1999
9 Berry, A et al. Oral hygiene as a critical nursing activity in the intensive care unit. *Intensive and Critical Care Nursing* (2006) 22, 318-328.
10 Fourier. E. Effects of dental plaque antiseptic decontamination on bacterial colonization and nosocomial infections in critically ill patients, *Intensive Care Med* (2000) 26:1.

11 APIC. Preventing Ventilator-Associated Pneumonia 2004
12 AACN News Vol. 23 No. 8 Aug 2006
13 5 Million Lives Campaign. Getting Started Kit: Prevent Ventilator-Associated Pneumonia How-to-Guide. Cambridge, MA: Crit Care Med 2003 Vol. 31, No.3
14 Garcia, R. A review of the possible role of oral and dental colonization on the occurrence of healthcare-associated pneumonia: underappreciated risk and a call for interventions. *Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology*, 2005, Vol. 33 No9, pp. 527-542.
15 High Impact Intervention Care bundle to reduce ventilation-association pneumonia; National Resource for Infection Control, 2011
16 Prevention of ventilator-associated pneumonia. Updated recommendation of KRINKO Nov 2013
17 CDC. Guidelines for Preventing Healthcare-Associated Pneumonia, 2003. Recommendations of the CDC and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. *MMWR* 2004; 53 (No. RR-3)
† Er zijn 354 productbeoordelingen ingevuld door verpleegkundigen en ademhalingstherapeuten uit 27 ziekenhuizen.

AVANOS

Stuur voor meer informatie een e-mail aan customerservice.bnl@avanos.com