




Echangeurs d'humidité et de chaleur

La valve de phonation TRACOE phon assist II donne aux laryngectomisés qui portent une prothèse vocale, ainsi qu'aux trachéotomisés, la possibilité de parler les mains libres. Les deux valves sont réglables individuellement par le patient.

TRACOE humid assist I à IV ainsi que TRACOE humid assist *kids* sont des échangeurs d'humidité et de chaleur qui filtrent, humidifient et réchauffent l'air inspiré comme un „nez artificiel“.


Accessoires pour connecteur de 15 mm

Valves de phonation

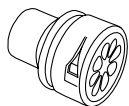


REF 650-T

TRACOE phon assist I

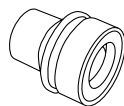


REF 655-T

TRACOE phon assist II

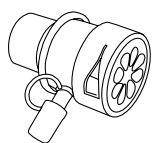

REF 650-TO


TRACOE phon assist I
avec raccord pour oxygène

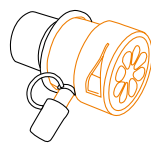

REF 650-TO-C

TRACOE phon assist I
de couleur signalétique et avec raccord
pour oxygène

Capuchon obturateur

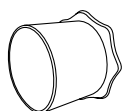


REF 516

TRACOE *modular* Capuchon
obturateur


Les produits présentés ici ne peuvent être utilisés qu'en combinaison avec des canules de trachéotomie fenêtrées ayant un connecteur de 15 mm. Toutes les canules avec ballonnet doivent être dégonflées avant la mise en place d'une valve de phonation ou d'un capuchon obturateur.

Echangeurs d'humidité et de chaleur

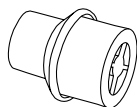


REF 640-CT

TRACOE humid assist I

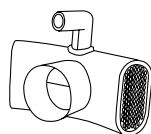

REF 641

TRACOE humid assist III

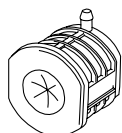

REF 642

TRACOE humid assist IV




REF 643

TRACOE humid assist *kids*



Adaptateur pour raccord de 22 mm

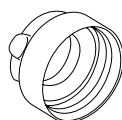

REF 622

TRACOE *modular*
Adaptateur pour raccord de 22 mm


Accessoires pour raccord de 22 mm

Valves de phonation




REF 650-S

TRACOE phon assist I

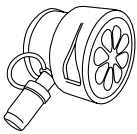

REF 650-SO


TRACOE phon assist I
avec raccord pour oxygène

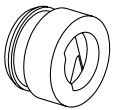

REF 655-S

TRACOE phon assist II

Bouchon obturateur

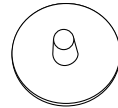


REF 621

TRACOE modular Bouchon obturateur
Attention: Ne pas utiliser avec le support adhésif REF 660!

Toutes les canules de phonation et les bouchons obturateurs représentés ici peuvent être insérés sur des canules courtes fenêtrées en silicone, des canules trachéales, des stoma et grid buttons ainsi que des supports adhésifs avec raccord de 22 mm.


Echangeur d'humidité et de chaleur

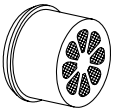

REF 640-S


TRACOE humid assist I

Echangeur d'humidité et de chaleur pour valves de phonation REF 655-T et REF 655-S

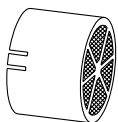


REF 645


TRACOE humid assist II

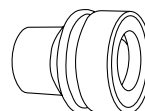

REF 655-T

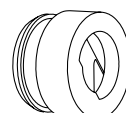

REF 655-S

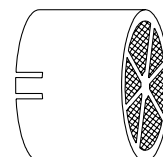

REF 645

Cet échangeur d'humidité et de chaleur est prévu exclusivement pour l'utilisation des canules de phonation à mains libres REF 655-T et REF 655-S.



REF 650-T



TRACOE phon assist I Valve de phonation

avec arrivée d'air latérale réglable en continu, pour canules fenêtrées avec connecteur de 15 mm

Conditionnement: ♦ 1 pièce
♦ emballage stérile

Attention: Ne convient pas aux patients laryngectomisés!



REF 650-TO



TRACOE phon assist I Valve de phonation

avec raccord pour oxygène et arrivée d'air latérale réglable en continu, pour canules fenêtrées avec connecteur de 15 mm

Conditionnement: ♦ 1 pièce
♦ 5 pièces, sous la REF 650-TO-5
♦ emballage individuel stérile

Inclus: ♦ adaptateur pour arrivée d'oxygène

Attention: Ne convient pas aux patients laryngectomisés!



REF 650-TO-C



TRACOE phon assist I Valve de phonation

de couleur signalétique, avec raccord pour oxygène et arrivée d'air latérale réglable en continu, pour canules fenêtrées avec connecteur de 15 mm

Conditionnement: ♦ 1 pièce
♦ 5 pièces, sous la REF 650-TO-C-5
♦ emballage individuel stérile

Inclus: ♦ adaptateur pour arrivée d'oxygène

Attention: Ne convient pas aux patients laryngectomisés!



En savoir plus dans notre vidéo du produit sur notre page internet www.tracoe.com/en/media-library



REF 650-S

**TRACOE phon assist I Valve de phonation**

avec arrivée d'air latérale réglable en continu et base plate pour canules courtes fenêtrées en silicone, canules de trachéotomie, stoma et grid buttons et support adhésif avec raccord de 22 mm

Conditionnement: ♦ 1 pièce
 ♦ emballage stérile

Attention: Ne convient pas aux patients laryngectomisés!



REF 650-SO

**TRACOE phon assist I Valve de phonation**

avec raccord pour oxygène et arrivée d'air latérale réglable en continu avec base plate pour canules courtes fenêtrées en silicone, canules de trachéotomie, stoma et grid buttons et support adhésif avec raccord de 22 mm

Conditionnement: ♦ 1 pièce
 ♦ emballage stérile
 Inclus: ♦ adaptateur pour arrivée d'oxygène

Attention: Ne convient pas aux patients laryngectomisés!

Valve de phonation et de thérapie

Les ouvertures latérales réglables en continu permettent d'adapter individuellement la résistance respiratoire. L'expiration a partiellement lieu par les ouvertures latérales et la voie respiratoire naturelle. Plus les ouvertures sont verrouillées, plus l'expiration a lieu par la voie respiratoire naturelle. Pour toutes les valves de phonation phon assist I REF 650-TO, REF 650-TO-C et REF 650-SO avec raccord pour oxygène, de l'oxygène peut être donné en supplément, en cas de besoin.

Exemples d'utilisation

- ♦ Au cours du sevrage de la ventilation mécanique afin de réduire l'Air-Trapping:
 Par un entrebâillement individuellement adapté des ouvertures latérales, l'expiration peut être facilitée au patient.
- ♦ Au cours de la réhabilitation précoce pour la sensibilisation et l'amélioration de la perception oropharyngée, c.-à-d. que la bouche et la gorge du patient sont sensibilisées et le réflexe de déglutition stimulé.
- ♦ Pour parler lorsque la canule trachéale est posée (fenêtrée et dégonflée).
- ♦ "Find the Voice" – entraînement facilité à la parole par un réglage individuel des ouvertures latérales (particulièrement utile chez les enfants).



REF 655-T



TRACOE phon assist II Valve de phonation mains libres
réglable en continu pour canules fenêtrées avec
connecteurs de 15 mm

- Conditionnement: ♦ 1 pièce
- Inclus: ♦ 5 pièces TRACOE humid assist II (REF 645)
♦ emballage individuel stérile

Attention: Après laryngectomie à n'utiliser qu'avec une prothèse vocale!



REF 645

TRACOE humid assist II
Echangeur d'humidité et de chaleur
avec filtre en mousse à insérer uniquement sur les
valves de phonation mains libres TRACOE phon assist II
REF 655-T et REF 655-S

- Conditionnement: ♦ 50 pièces
♦ emballage individuel stérile



REF 516

TRACOE modular Capuchon obturateur
pour canules fenêtrées avec connecteur de 15 mm

- Conditionnement: ♦ 5 pièces
♦ emballage individuel stérile

Attention: Ne convient pas aux patients laryngectomisés!

REF 655-S



TRACOE phon assist II Valve de phonation mains libres réglable en continu avec base plate pour canules courtes fenêtrées en silicone, canules de trachéotomie, stoma et grid buttons et support adhésif avec raccord de 22 mm

- Conditionnement: ♦ 1 pièce
Inclus: ♦ 5 pièces TRACOE humid assist II (REF 645)
♦ emballage individuel stérile

Attention: Après laryngectomie à n'utiliser qu'avec une prothèse vocale!

Exemples d'utilisation pour REF 645



REF 645 + REF 655-T



REF 645 + REF 655-S



REF 621

TRACOE modular Bouchons obturateurs pour la fermeture temporaire de stoma et de grid buttons ainsi que de canules courtes fenêtrées en silicone, en cas de voies respiratoires supérieures libres et de respiration sans gêne

- Conditionnement: ♦ 5 pièces
♦ emballage individuel stérile

Attention: Ne convient pas aux patients laryngectomisés!



REF 640-CT

TRACOE humid assist I

Echangeur d'humidité et de chaleur

avec filtre en mousse à insérer sur toutes les canules de trachéotomie avec connecteur de 15 mm

Conditionnement: ♦ 50 pièces
♦ emballage individuel stérile



REF 641

TRACOE humid assist III

Echangeur d'humidité et de chaleur

avec filtre en papier, arrivée d'oxygène orientable à 360° optionnelle, à insérer sur toutes les canules de trachéotomie avec connecteur de 15 mm

Conditionnement: ♦ 50 pièces
♦ emballage individuel stérile



REF 642

TRACOE humid assist IV

Echangeur d'humidité et de chaleur

avec filtre en mousse, arrivée d'oxygène intégrée et valve de surpression pour l'expectoration de grandes quantités de sécrétions, à insérer sur toutes les canules de trachéotomie avec connecteur de 15 mm

Conditionnement: ♦ 30 pièces
♦ emballage individuel stérile



REF 643



TRACOE humid assist *kids*

Echangeur d'humidité et de chaleur

avec filtre en papier à insérer sur toutes les canules pour enfants et nouveau-nés avec connecteur de 15 mm. Peut être utilisé chez des enfants dont le volume courant est compris entre 7 ml – 50 ml.

Conditionnement: ♦ 50 pièces
♦ emballage individuel stérile



REF 640-S

TRACOE humid assist I

Echangeur d'humidité et de chaleur

avec filtre en mousse et base plate pour canules courtes en silicone, canules de trachéotomie, stoma et grid buttons et support adhésif avec raccord de 22 mm

Conditionnement: ♦ 50 pièces
♦ emballage individuel stérile

Pour patients avec et sans prothèse vocale.



REF 622

TRACOE *modular* Adaptateur pour raccord de 22 mm

pour utilisation avec des canules avec connecteur de 15 mm

Conditionnement: ♦ 1 pièce