



REF 311 

TRACOE *twist* plus Canule de trachéotomie
avec ballonnet

- Inclus:
- ◆ 2 chemises internes avec connecteur de 15mm
 - ◆ obturateur perforé
 - ◆ collier pour canule
 - ◆ emballage stérile



REF 312  

TRACOE *twist* plus Canule de trachéotomie
avec ballonnet, fonction de phonation,
double-fenêtrage sur l'arc intérieur et extérieur

- Inclus:
- ◆ chemise interne, doublement fenêtrée avec connecteur de 15mm
 - ◆ chemise interne avec connecteur de 15mm
 - ◆ capuchon obturateur pour canules fenêtrées
 - ◆ obturateur perforé
 - ◆ collier pour canule
 - ◆ emballage stérile



REF 313 

TRACOE *twist* plus Canule de trachéotomie

- Inclus:
- ◆ 2 chemises internes avec connecteur de 15mm
 - ◆ obturateur perforé
 - ◆ collier pour canule
 - ◆ emballage stérile

Vous trouverez tous les numéros de commande et les dimensions dans les tableaux en pages 40/41.

Des différences minimales avec les illustrations sont possibles.



REF 311-P 

TRACOE twist plus Canule de trachéotomie
avec système d'insertion atraumatique et ballonnet

- Inclus:
- ◆ 2 chemises internes avec connecteur de 15 mm, une déjà prémontée
 - ◆ gel lubrifiant
 - ◆ obturateur perforé
 - ◆ collier pour canule
 - ◆ emballage stérile

En kit percutané dans la REF 330



REF 312-P  

TRACOE twist plus Canule de trachéotomie
avec système d'insertion atraumatique, ballonnet,
fonction de phonation, double-fenêtrage sur l'arc
intérieur et extérieur

- Inclus:
- ◆ 2 chemises internes avec connecteur de 15 mm, une déjà prémontée
 - ◆ chemise interne, doublement fenêtrée avec connecteur de 15 mm
 - ◆ capuchon obturateur pour canules fenêtrées
 - ◆ gel lubrifiant
 - ◆ obturateur perforé
 - ◆ collier pour canule
 - ◆ emballage stérile

En kit percutané dans la REF 331



REF 314  

TRACOE twist plus Canule de trachéotomie
avec fonction de phonation, double-fenêtrage sur l'arc
intérieur et extérieur

- Inclus:
- ◆ chemise interne, doublement fenêtrée avec connecteur de 15 mm
 - ◆ chemise interne avec connecteur de 15 mm
 - ◆ capuchon obturateur pour canules fenêtrées
 - ◆ obturateur perforé
 - ◆ collier pour canule
 - ◆ emballage stérile



REF 316 

TRACOE *twist* plus Canule de trachéotomie
avec ballonnet et dispositif d'aspiration sous-glottique

- Inclus:
- ◆ 2 chemises internes avec connecteur de 15mm
 - ◆ 2 connecteurs pour appareils d'aspiration
 - ◆ obturateur perforé
 - ◆ collier pour canule
 - ◆ emballage stérile



REF 888-316  

TRACOE *twist* plus Canule de trachéotomie
avec ballonnet, dispositif d'aspiration
sous-glottique, fonction de phonation,
double-fenêtrage sur l'arc intérieur et extérieur

- Inclus:
- ◆ chemise interne avec connecteur de 15mm
 - ◆ chemise interne, doublement fenêtrée avec connecteur de 15mm
 - ◆ capuchon obturateur pour canules fenêtrées
 - ◆ 2 connecteurs pour appareils d'aspiration
 - ◆ obturateur perforé
 - ◆ collier pour canule
 - ◆ emballage stérile


REF 316-P 

TRACOE *twist* plus Canule de trachéotomie
 avec système d'insertion atraumatique, ballonnet
 et dispositif d'aspiration sous-glottique

- Inclus:
- ◆ 2 chemises internes avec connecteur de 15 mm, une déjà prémontée
 - ◆ 2 connecteurs pour appareils d'aspiration
 - ◆ gel lubrifiant
 - ◆ obturateur perforé
 - ◆ collier pour canule
 - ◆ emballage stérile

En kit percutané dans la REF 332


REF 888-316-P  

TRACOE *twist* plus Canule de trachéotomie
 avec système d'insertion atraumatique, ballonnet,
 dispositif d'aspiration sous-glottique, fonction de
 phonation, double-fenêtrage sur l'arc intérieur et
 extérieur

- Inclus:
- ◆ 2 chemises internes avec connecteur de 15 mm, une déjà prémontée
 - ◆ chemise interne, doublement fenêtrée avec connecteur de 15 mm
 - ◆ 2 connecteurs pour appareils d'aspiration
 - ◆ capuchon obturateur pour canules fenêtrées
 - ◆ gel lubrifiant
 - ◆ obturateur perforé
 - ◆ collier pour canule
 - ◆ emballage stérile

En kit percutané dans la REF 888-332



REF 501

TRACOE *twist* Chemises internes de rechange
avec connecteur de 15 mm

- Conditionnement:
- ◆ 3 pièces (*dans les tailles 04 – 10*)
 - ◆ 10 pièces sous la **REF 501-X**
(*dans les tailles 04 – 10*)
 - ◆ 30 pièces sous la **REF 501-XXX**
(*dans les tailles 06 – 09*)
 - ◆ emballage individuel stérile



REF 506



TRACOE *twist* Chemises internes de rechange
fenêtrées avec connecteur de 15 mm

- Conditionnement:
- ◆ 3 pièces (*dans les tailles 04 – 10*)
 - ◆ 10 pièces sous la **REF 506-X**
(*dans les tailles 04 – 10*)
 - ◆ emballage individuel stérile



REF 401



TRACOE *twist* Chemises internes
fenêtrées, avec valve de phonation intégrée

- Conditionnement:
- ◆ 2 pièces (*dans les tailles 04 – 10*)
 - ◆ emballage individuel stérile



REF 503

TRACOE *twist* Chemises internes de rechange
courtes, avec connecteur de 15 mm, pour REF 305

- Conditionnement:
- ◆ 3 pièces (*dans les tailles 05 – 10*)
 - ◆ emballage individuel stérile



REF 521

TRACOE *twist* plus Chemises internes de rechange
avec connecteur de 15 mm

- Conditionnement:
- ◆ 3 pièces (*dans les tailles 07 – 10*)
 - ◆ 10 pièces sous la **REF 521-X**
(*dans les tailles 07 – 10*)
 - ◆ 30 pièces sous la **REF 521-XXX**
(*dans les tailles 07 – 09*)
 - ◆ emballage individuel stérile



REF 523




TRACOE *twist* plus Chemises internes de rechange
doublement fenêtrées avec connecteur de 15 mm

- Conditionnement:
- ◆ 3 pièces (*dans les tailles 07 – 10*)
 - ◆ 10 pièces sous la **REF 523-X**
(*dans les tailles 07 – 10*)
 - ◆ emballage individuel stérile

Caractéristiques techniques

TRACOE *twist*

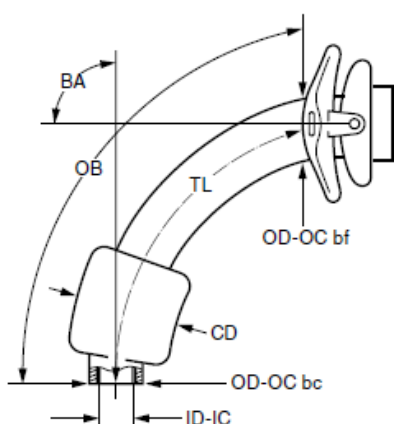

REF 301, REF 302, REF 303,
REF 304, REF 306, REF 309

in sizes 04 – 10

REF 888-306

in sizes 06 – 10


REF 301-P, REF 302-P,

REF 306-P, REF 888-306-P

in sizes 07 – 09

Size	ID-IC mm	OD-OC bc mm	OD-OC bf mm	TL mm	OB mm	BA °	CD mm
04	4.0	7.2	8.6	59	63.0	110	15
05	5.0	8.6	10.1	66	73.0	100	18
06	6.0	9.2	10.8	72	79.5	95	23
07	7.0	10.4	12.0	74	80.5	95	26
08	8.0	11.4	12.7	76	83.0	90	28
09	9.0	12.5	14.2	78	88.5	90	30
10	10.0	13.8	15.2	80	89.5	90	32

TRACOE *twist* Laryngectomy Tube

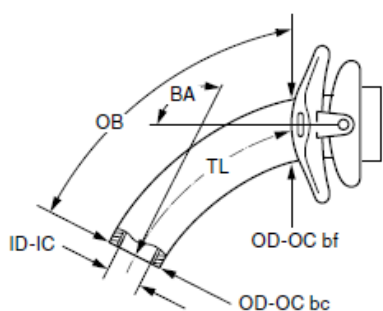

REF 305


Size	ID-IC mm	OD-OC bc mm	OD-OC bf mm	TL mm	OB mm	BA °
05	5.0	9.0	10.1	47	52	125
06	6.0	9.4	10.8	50	56	120
07	7.0	10.6	12.0	52	59	120
08	8.0	11.6	12.7	56	63	115
09	9.0	12.8	14.2	58	66	108
10	10.0	14.2	15.2	60	70	100

ID-IC: Diamètre intérieur (lumen) de la chemise interne à l'extrémité inférieure; **AD-AK ke:** Diamètre extérieur de la canule externe à l'extrémité de la canule; **AD-AK hs:** Diamètre extérieur de la canule externe derrière la collerette; **TL:** Longueur sur la ligne médiane de la base de la collerette jusqu'à l'extrémité inférieure de la canule; **AB:** Longueur sur l'arc extérieur de la base de la collerette jusqu'à l'extrémité inférieure de la canule; **BW:** Angle de courbure; **CD:** Diamètre du ballonnet

Le numéro de commande est composé de la **REF + Taille**, p. ex. **REF 306-08**

et contenu de l'emballage

TRACOE *twist plus*

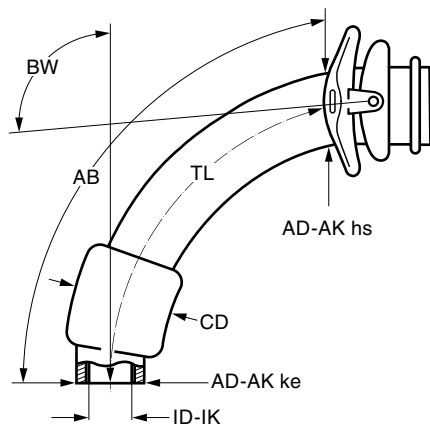

REF 311, REF 312, REF 313, REF 314, REF 316, REF 888-316,
REF 311-P, REF 312-P, REF 316-P, REF 888-316-P

Taille	ID-IK mm	AD-AK ke mm	AD-AK hs mm	TL mm	AB mm	BW °	CD mm
07	7,0	9,8	10,1	85	91	100	26
08	8,0	10,8	11,1	88	95	100	28
09	9,0	11,8	12,1	90	99	100	30
10	10,0	12,8	13,1	92	102	100	32

Contenu de l'emballage des canules TRACOE *twist* et *twist plus*



twist



twist plus



Toutes les canules de trachéotomie TRACOE *twist* et *twist plus* sont livrées avec un obturateur perforé (dans les tailles 06 – 10), un collier pour canule large et réglable en longueur, ainsi qu'une fiche produit avec deux étiquettes produit détachables.



Un gel lubrifiant est fourni avec les canules P *twist* et *twist plus*.



Toutes les canules P TRACOE *twist* sont livrées avec un tube de recanulation.

Informations produit et particularités

Le fenêtrage



TRACOE *twist* et *twist plus*

Les canules fenêtrées *twist* et *twist plus* disposent d'une perforation sur l'arc extérieur. La canule *twist plus* (la longueur de la canule est adaptée à l'augmentation de l'indice de masse corporelle (IMC)) se caractérise par un double fenêtrage: en plus de la perforation, elle dispose de deux ouvertures de phonation sur l'arc intérieur.

TRACOE *twist* REF 888-306 et *twist plus* REF 888-316

Une canule multifonction avec ballonnet, dispositif d'aspiration sous-glottique et fonction de phonation. Utilisable avec chemise interne fermée pour la ventilation, avec chemise interne fenêtrée et ballonnet dégonflé en canule de thérapie.

Signes distinctifs des chemises internes et des canules externes

Vert et blanc signifient non fenêtré



- ◆ Un marquage vert correspond à une canule externe non fenêtrée



- ◆ Les chemises internes non fenêtrées de la gamme *twist* sont reconnaissables aux connecteurs blancs de 15mm



- ◆ Les chemises internes non fenêtrées de la gamme *twist plus* sont reconnaissables à un capuchon moleté blanc

Bleu signifie fenêtré



- ◆ Un marquage bleu correspond à une canule externe fenêtrée



- ◆ Les chemises internes fenêtrées de la gamme *twist* sont reconnaissables aux connecteurs bleus de 15mm



- ◆ Les chemises internes fenêtrées de la gamme *twist plus* sont reconnaissables à un capuchon moleté bleu



Une vidéo montrant des conseils détaillés de soins des canules TRACOE *twist* et *twist plus* est disponible sur notre site internet www.tracoe.com/en/media-library